



Guida informativa al prodotto



TENA Men

Protezioni assorbenti maschili e discrete

Gli ausili assorbenti per incontinenza urinaria **TENA Men** sono progettati per adattarsi all'**anatomia maschile**, offrendo elevata vestibilità e discrezione. **Assorbono rapidamente i liquidi per una sensazione di asciutto in superficie** e sono pratici da indossare grazie alla striscia adesiva per fissare il prodotto nella corretta posizione.



Assorbente
maschile
LIVELLO 1



Assorbente
maschile
LIVELLO 2



Assorbente
maschile
LIVELLO 3




Discreto grazie
al suo design sottile



Morbida sagomatura,
appositamente progettata
per l'anatomia maschile

Zona ad elevata assorbenza
per trattenere i liquidi
lontani dalla superficie

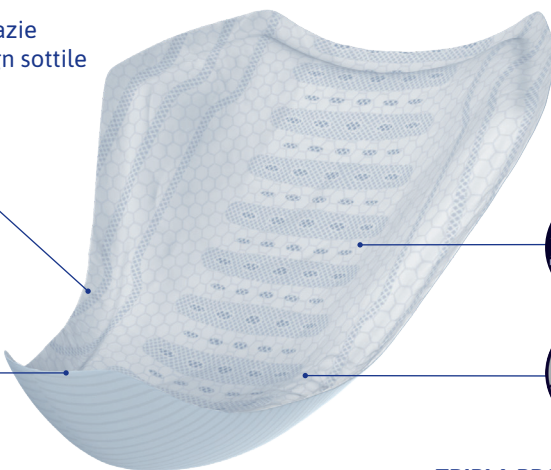

TRIPLA PROTEZIONE
da perdite, odori
e sensazione
di bagnato sulla pelle


Come indossare le protezioni TENA Men



Scartare il prodotto e rimuovere la pellicola.
L'estremità più larga va rivolta verso l'alto.
Posizionare l'area adesiva verso il basso
e fissarla alla biancheria intima.
Utilizzare il prodotto con biancheria
aderente.



Rimane in posizione:
striscia adesiva per fissare l'assorbente
alla biancheria intima.

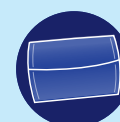

Confezionati singolarmente:
possono essere comodamente tenuti
in tasca o in borsa e smaltiti
in modo discreto.



È un Dispositivo Medico CE
per incontinenza urinaria.
Leggere le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
Autorizzazione Ministeriale del 07/08/2023.



essity

TENA
un brand Essity